



Használati útmutató

BioNette™

Egy forradalmian új eszköz az allergiás nátha (szénanátha) kezelésére. A **BioNette™** enyhíti és hatékonyan megelőzi az allergiás náthához kapcsolódó tüneteket: torok viszketést, szem viszketést, orr viszketést, orrfolyást, könnyezést, tüsszentést, szem körüli vizenyőt. A kezelésnek nincs ismert mellékhatása, mint a gyógyszeres kezelésnek. A kezelés a fototerápia alapelvein nyugszik.

(Kezelés fény energiával.)

A **BioNette™** eszköz alacsony energiájú, szűk spektrumú vörös fény energiát alkalmaz.

AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Egy kezelés alkalmanként kb. 4,5 percig tart. Naponta 2-3 kezelés javasolt. A maximális hatékonyság elérése és a panaszok optimális enyhítése érdekében javasolt a **BioNette™** kezeléseket azonnal a nátha első tüneteinek megjelenésekor. Ahogyan javulás érzékelhető, a kezeléseket fokozatosan csökkenthető, egészen a panaszok teljes megszűnéséig.

BioNette™ egy kicsi eszköz, amely akár a legkisebb zsebben is elfér.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Húzza ki az elem vékony, átlátszó záró szalagját.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Nyomja le és tartsa nyomva a gombokat a készülék mindkét oldalán (1). A két áttetsző villa vörös fényt bocsát ki.
- Győződjön meg róla, hogy a fény folyamatosan világít és nem villog.
- Helyezze be a két villát az orrnyílásokba úgy, hogy közben nyomva tartja a gombokat.
- Ezután elengedheti a gombokat, a készülék nem fog kiesni az orrából.


- Ha a kezelés befejeződött, kb. 4,5 perc elteltével, a vörös fény automatikusan kialszik. (Ha egyszer be lett kapcsolva a fény, akkor már kezelés közben nem kapcsolható ki).
- Kövesse a tájékoztatóban alábbiakban található tisztítási útmutatót.
- A készüléket naponta 2-3-szor ajánlott használni. Az eredményesség növelése érdekében többször is alkalmazható.

Figyelmeztetés: • Gyermekek elől elzárandó! • Gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják. • Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!

ELEM CSERE

A BioNette csomag a készülékben (1) található elemeken kívül 2 db jó minőségű lithium CR2032 (3V) elemet tartalmaz.

Emelje ki a készülék alján található az elemtartót (2) és helyezze be a tartalék elemeket (3) megfelelő pozícióban, ahogy az az ábrán látható.

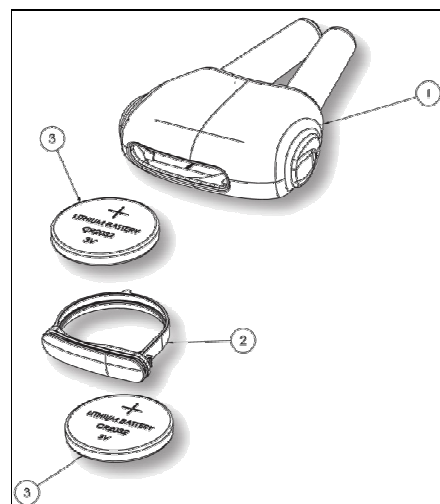

1. ábra
Elem csere

TECHNIKAI ADATOK

| | |
|-----------------------------------|--|
| Fény tulajdonsága | Szűk spektrumú, 630 nm-es vörös fény |
| Teljesítmény | Minimum 10.0 mW (+/-20%) mindkét ornyíflásba |
| Energia dózis | 2.7 joule |
| Időzítő | Nyomógombos működtetés, kb. 4,5 perc után automatikusan kikapcsol. |
| Időzítő pontosság | +/- 15% |
| Energia forrás | 2X CR2032 (3v) |
| Áramerősség (Max) | 0.03A |
| Elem élettartam | Kb. 80 kezelés |
| Alacsony elem töltöttség kijelzés | A LED fényforrás villog |
| Súly | 18 gramm elemekkel |
| Méret | 52x38x15 mm |

KÖLCSÖNHATÁSOK

Nincs ismert kölcsönhatás, amennyiben a fényterápiát gyógyszereszedés mellett alkalmazzák. A BioNette™ gyógyszerek, mint például antihisztaminok vagy szteroidok vagy egyéb gyulladáscsökkentők szedésével egyidejűleg is alkalmazható.

MELLÉKHATÁSOK

A BioNette™ alkalmazásának nincs ismert mellékhatása. Még a súlyos allergies tünetektől szenvedők is naponta több, mint 3 alkalommal használhatják a **BioNette™ -t** bármilyen mellékhatás nélkül.

A BIOLIGHT TERMÉKCSALÁDRÓL

A BIOLIGHT termékcsoport – amelynek a **BioNette™** az egyik tagja – olyan termékekből áll, amelyek alacsony energiájú, szűk spektrumú fényenergiát alkalmaznak non-invazív, gyógyszermentes kezelésekhöz.

Ezeket a készülékeket a fény biológiájában és a fényterápiában jártas tudósok és orvosok fejlesztik. A hatásosságot nagy számú, kórházakból és klinikákról kapott tudományos és klinikai adat támasztja alá.

Ezek az adatok és vizsgálatok világszerte elismert szakmai folyóiratokban kerülnek publikálásra. A fényterápiás készülékek jelentős áttörést jelentenek a gyógyszer nélküli kezelésekben. Hatásuk meggyőző és nincs ismert mellékhatásuk.

A **BioNette™** készülék bevezetése egy forradalmian új, gyógyszermentes alternatívát kínál a szénanátha kezelésében.

Egyéb BIOLIGHT termékek:

BIOSTICK™, BIOBEAM™ 660, BIOBEAM™ 940, és BIOBEAM™ ACNE.

BioNette™ bejegyzett védjegy.

TISZTÍTÁS

Tisztítás: A fényforrást enyhe tisztítóoldattal átitatott puha, nedves ruhával tisztítsuk.

A **BioNette™** -t soha ne tegyük víz alá!

Fertőtlenítés: A fényforrások tisztítását gyógyszertárban kapható impregnált fertőtlenítő kendőkkel javasoljuk.

Hygiéniai védelem: Tartsuk a készüléket mindig a lehető legtisztábban!

PROBLÉMA KEZELÉS

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás/Teendő |
|--------------------------|---|---|
| A vörös fény nem világít | Az elemek lemerültek | Cserélje ki az elemeket |
| | Az elemek nem megfelelően lettek behelyezve | Helyezze be helyesen az elemeket |
| | A BioNette meghibásodott | Ha a fentiek nem vezettek eredményre, keresse meg a forgalmazót |
| A vörös fény villog | Az elemek gyengék | Cserélje ki az elemeket |

A GYÁRTÓ KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSA

A vásárló felé tanúsított jótállás a biztosíték, hogy a készülék anyagát és működését tekintve is hibamentes.

A jótállás a vásárlás időpontjától számított 2 évig érvényes.

A jótállás kiterjed a javításra illetve a készülék ingyenes cseréjére, amennyiben a készülék meghibásodása normál működési körülmények között és a használati útmutatónak megfelelő használat mellett következett be.

FIGYELMEZTETÉS








Soha ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!

Gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják!

A JÓTÁLLÁS NEM ÉRVÉNYES A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN:

- A használati útmutatónak nem megfelelő használat
- A készülék javítása nem a gyártó vagy a gyártó által felhatalmazott képviselő által történt.
- Véletlenszerű törés vagy sérülés esetén
- Nem megfelelő elem használatából bekövetkezett károsodás.

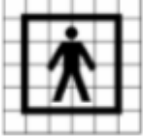bionette az allergiás nátha kezelésére
Szimbólumok a csomagoláson

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | A figyelmeztetés szigorúan betartandó |  | Az Európai Unióban felhatalmazott képviselő |
|  | Gyártó |  | Nézze meg a használati útmutatóban |
|  | Type "BF" IEC 60601-1 |  | A gyártás időpontja |
|  | WEEE – Elektromos és elektronikai készülék. Veszélyes hulladék | | |



A gyártást engedélyezte: BioLight Medical Devices (IL) Ltd
No. 9 Bareket St. Petah Tikva, POB2263, Kiryat Ono, 5512201, Israel



Changzhou BioLight Medical Devices Co. Ltd
Israel Centre; Building 7C, No. 123 He Xiang Rd. ,
Wujin Dist, Changzhou 213149, Jiangsu, China

CE0123



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Tel:+49-40-2513175/2513178; Fax:+ 49-40-255726

Gyártói tanúsítványok: ISO 13485 (2012), MDD 2007/47 EEC (2007),

A fényterápiás technológia & alkalmazás szabadalmaztatott.

A BioNette eszköz világszerte szabadalmaztatott.

Version 420.00.01. (rev 05) Date 01-01-2017



Made in P.R.C.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

Extramed kft.



4400 Nyíregyháza, Garibaldi u. 22. ¼.

tel.: +36 30 3116944

e-mail.: info@extramed.hu

www.otthoni-kezeles.hu